


## D600 LED DTE-Woodpecker

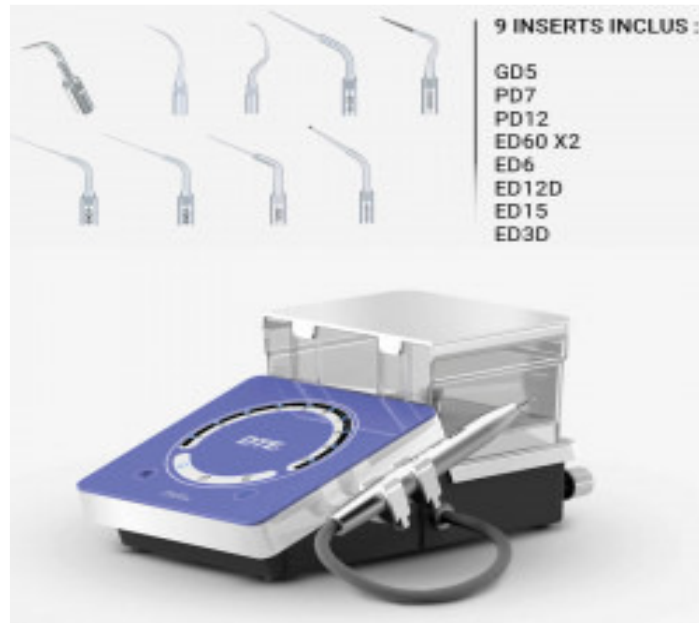

**Le D600LED est un moteur à ultrasons portable destiné aux traitements de prophylaxie.**

Il est doté de 3 programmes :

- détartrage
- endodontie
- parodontie

Entièrement démontable et autoclavable, la puissante pièce à main est compatible avec les inserts de type Satelec.

Facilement programmable grâce à une interface simple et pratique (y compris avec gants mouillés !), il dispose d'une fréquence de travail réglable entre 28kHz et 31 kHz. La pression de l'eau est ajustable : 0,01 MPa à 0,5 MPa.

Alimentation en eau via l'unité ou grâce à son réservoir autonome d'une capacité de 700ml.

Il est fourni avec 9 inserts compatibles Satelec® : WP-GD5, WP-PD7, WP-PD12, WP-ED60 (x2), WP-ED6, WP-ED12D, WP-ED15, WP-ED3D.

### Inserts

- WP-GD5 : détartrage universel = type n°1 Satelec
- PD7 : détartrage supra et sous-gingival et interproximaux = type n° 1S Satelec
- PD12 : parodontie initiale antérieure = type H3 Satelec
- ED60 (x2) : utilisé pour l'irrigation endo. La longueur de la partie filetée est de 16 mm, le diamètre de 0,2 mm
- ED6 : reprise de traitement dans le tiers médian et apical et l'extraction des instruments fracturés = type n° ET25 Satelec
- ED12D: utilisé pour éliminer les calcifications et les mauvais matériaux d'obturation dans la cavité pulpaire = type n° ETBD Satelec
- ED-15: utilisé pour retirer les instruments cassés dans le canal = type ET20 Satelec
- ED3D : instrument diamanté. Finition de la cavité d'accès pour l'élargissement du canal radiculaire et l'accès aux limes cassées dans le canal = type ET18D Satelec



**Contient :**

- 1 détartreur avec réservoir de 700 ml*
- 1 pièce à main*
- 9 inserts assortis : WP-GD5, WP-PD7, WP-PD12, WP-ED60 (x2), WP-ED6, WP-ED12D, WP-ED15, WP-ED3D*
- 1 clé torque dynamométrique*
- 1 clé endo*
- 1 pédale*

<i>Marque</i>	<i>Woodpecker DTE</i>
<i>Référence</i>	<i>WPD600LED</i>
<i>Entretien</i>	<i>autoclavable ou usage unique selon les composants</i>
<i>Dispositif médical</i>	<i>Classe IIa</i>
<i>Fabricant</i>	<i>WOODPECKER DTE (Chine)</i>
<i>Compatibilité</i>	<i>SATELEC®</i>

